

# BỘ GIẢI PHÁP NUNG NHANH EVEREST



# NỘI DUNG

GIỚI THIỆU UNC → 03

---

HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỘI NGŨ → 04

---

VẤN ĐỀ CỦA CÁC LABO → 05

---

GIẢI PHÁP NUNG NHANH → 07

---

THÔNG SỐ KỸ THUẬT → 09

---

CẢM ƠN → 12

---

# NHÀ SẢN XUẤT ZIRCONIA HÀNG ĐẦU TẠI HÀN QUỐC

Là một trong những công ty trưởng thành từ viện nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ sứ Hàn Quốc Korean Institute of Ceramic Engineering and Technology (KICET), UNC sau hơn 10 năm hoạt động đã trở thành nhà sản xuất phôi Zirconia chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời có mặt tại 22 Quốc gia trên thế giới. Trong đó chi nhánh duy nhất ở Đông Nam Á - UNC International SEA tại Việt Nam hiện đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).





Tinh gọn và hiệu quả là tiêu chí cho sự phát triển của UNC. Với mục tiêu mang tới thị trường Việt Nam những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, UNC liên tục tiên phong trong các công nghệ phôi Zirconia và các sản phẩm liên quan.

**2018**



Chính thức phân phối các dòng phôi Razor & Everest tại Việt Nam

**1.000.000**



Số đơn vị răng được bán ra tại thị trường Việt Nam

**150**



Hơn 150 Labo đã và đang sử dụng các sản phẩm của UNC cho phục hình của mình

**1**



Mục tiêu hướng tới trở thành thương hiệu phôi Zirconia Hàn Quốc dẫn đầu tại Việt Nam



# CUỘC CẠNH TRANH VỀ TỐC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG



Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên số và bận rộn, nơi mà người tiêu ngày càng khát khe về tốc độ dịch vụ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng. Ngành phục hình răng không nằm ngoài cuộc chơi.


Vì lý do đó, UNC xin giới thiệu một bộ giải pháp giúp mang lại sự chủ động về thời gian cho Nha khoa/Labo và bệnh nhân. Bộ giải pháp Zirconia-1-Ngày là sự kết hợp hoàn hảo khi đảm bảo chất lượng, màu sắc phục hình ổn định với thời gian nung chỉ 40 phút.



Đáp ứng cho những ca phục hình gấp, khách du lịch/ở xa cần thực hiện trong ngày, khắc phục cho những ca lỗi phục hình nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng... là vấn đề phổ biến ở các labo và nha khoa có labo.


Việc xử lý nhanh chóng gần như trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong bất cứ phòng Lab nào trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

### **3 lợi ích của giải pháp Zirconia-1-Ngày**

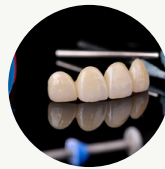

Tăng tỉ lệ hài lòng của khách hàng

---

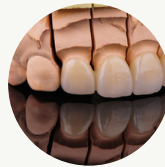

Khắc phục nhanh các ca hàng gấp mà vẫn đảm bảo chất lượng, màu sắc

---



Rút ngắn thời gian trung bình cho một ca phục hình

---

# BỘ GIẢI PHÁP ONE DAY ZIRCONIA - NHA KHOA 1 NGÀY HẸN



Bộ đôi lò nung nhanh Everest Volcan Speed và phi nung nhanh Everest Multilayer UVS - Trụ thủ đắc lực cho labo và nha khoa trong giải pháp Zirconia-1-Ngày

# BỘ ĐÔI GIẢI PHÁP NUNG NHANH UVS



## everest MULTILAYER UVS

Phôi Đa lớp Everest Universal Speed (UVS) tích hợp công nghệ đa lớp mới nhất, cho ra kết quả phục hình với độ bền cao và độ trong mà không ảnh hưởng tới độ ổn định màu sắc trong cả chương trình nung thường và nung nhanh. Sử dụng cho phục hình từ mẫu lẻ đến toàn hàm.

**Độ trong mờ**



48%  
47%  
46%  
45%

**Độ bền uốn**

900MPa  
1000MPa  
1100MPa  
1150MPa

**Chỉ định**

Single crown to full arch  
(Anterior / Posterior)

**Màu**

A1, A2, A3, A3.5, A4  
B1, B2, B3, B4  
C1, C2, C3, C4  
D2, D3, D4  
BL

**Size**

12mm 20mm  
14mm 22mm  
16mm 25mm  
18mm

## Everest Volcan Speed


Kết hợp với phôi nung nhanh UVS cho ra kết quả phục hình chỉ trong 40 phút với mẫu lẻ và 4h với toàn hàm.

- Chế độ nung nhanh 40 phút
- Nung nhanh tối đa 5 đơn vị mẫu lẻ
- Màu sắc ổn định và đồng nhất
- khay nung thường 2 lớp đường kính 90mm
- Độ tinh khiết và độ bền nhiệt cao
- 10 chương trình mặc định và 90 chương trình tùy chỉnh
- Có chế độ nung thường cho các phôi khác






# EVEREST MULTILAYER UVS

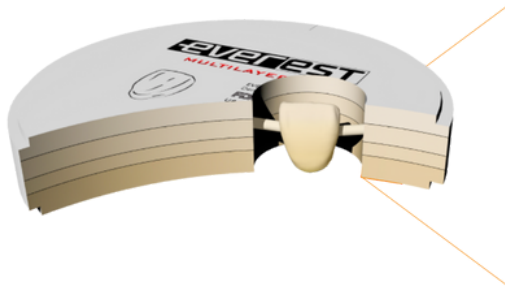

Flexural Strength


- 900 MPa
- 1000 MPa
- 1100 MPa
- 1150 MPa

Translucency

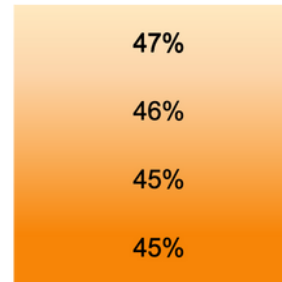

4 lớp chuyển tiếp của Everest UVS

**NUNG  
4 TIẾNG**      **NUNG  
30 PHÚT**

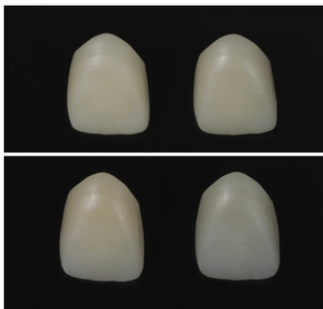

PHÔI ĐA LỚP  
EVEREST UVS

CÁC LOẠI  
ĐA LỚP KHÁC

Kết quả nung test từ phôi UVS  
và phôi khác


**Zirconia-  
1-Ngày**

**everest**  
MULTILAYER UVS



EVEREST W ML UNIVERSE  
Dimension : Ø98  
FDA ISO 13485:2016  
9001:2015  
U&C International Co., Ltd.  
106-11, Beomjigi-ro, Gyeonggi-do  
www.uncint.com  
marketing@uncint.com

# EVEREST VOLCAN SPEED

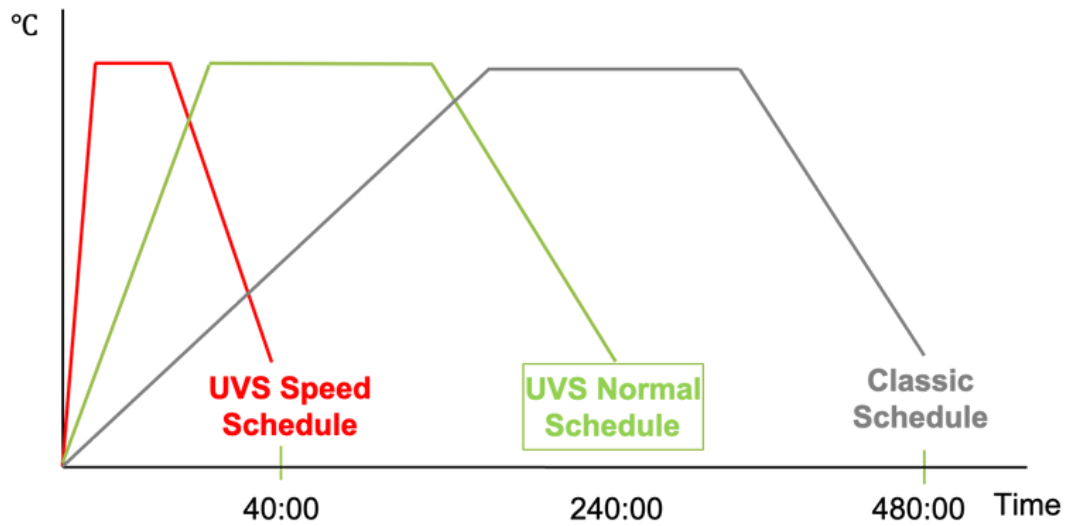

Công nghệ gia nhiệt kết hợp với phôi UVS cho phép chương trình nung tối ưu thời gian 40 phút cho chương trình nung nhanh (UVS), 4 tiếng với chương trình nung thường. (UVS), đồng thời vẫn hoạt động với các chương trình nung thông thường cho các dòng phôi khác, giúp khách hàng linh hoạt trong việc sử dụng lò nung Everest Volcan Speed.

**Zirconia-  
1-Ngày**

# EVEREST VOLCAN SPEED

<b>CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ</b>		<b>TỔNG QUAN</b>	
Loại cảm biến	Thermocouple R-Type	Điện áp	AC220V, 50/60 Hz
Dải cảm biến	0-1760 °C	Cầu chì	30A/AC250V
<b>BỘ ĐIỀU KHIỂN CHÍNH</b>		Dòng điện tối đa	15A
Điện áp	DC12V	Kích thước lò	270mm (Rộng) x 335mm (Dài) x 565mm (H)
Hiển thị	Màn hình LED	Kích thước buồng nung	Ø100mm x 80mm (Cao)
Bộ điều khiển I/O		Nhiệt độ tối đa	1600 °C
Điện áp	DC 12V	Tốc độ gia nhiệt cao nhất	99 °C /min
Đầu ra	1Ch. :DC Fan	Nhiệt độ môi trường	2-35 độ C
<b>Khác</b>		Độ ẩm hoạt động	80%
Thanh Nhiệt	Super - Kanthal	Độ cao hoạt động	< 3800m
Phụ kiện	1 chén nung nhanh, 1 chén nung thường, kẹp gấp chén nung, khay làm mát, 1 lọ cát nung	Trọng lượng	32 kg

CẢM ƠN  
QUÝ KHÁCH HÀNG  
ĐÃ QUAN TÂM!

UNC

International

Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết?

Vui lòng liên hệ:

Mr. Tạ Ngọc Tiến - Growth Specialist

Phone: 094 477 4485

Copy right by UNC International SEA